

MATRIX MTA+

Матриця для МТА+



ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

ПРИЗНАЧЕННЯ:


Матриця Matrix MTA+ використовується для формування аплікаційної дози матеріалу МТА+ перед внесенням у порожнину або канал.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Підготувати матеріал МТА+ згідно з інструкцією по застосуванню виробника, що додається до препарату МТА+. На кожній із стінок матриці Matrix MTA+ знаходяться порожнини з заданим діаметром від 0,7 мм (mm) до 1,0 мм (mm). Підготовлений матеріал необхідно розмістити на стінці матриці таким чином, щоб він заповнив всю обрану порожнину. З допомогою обраного стерильного інструменту зняти сформований матеріал з матриці.



5

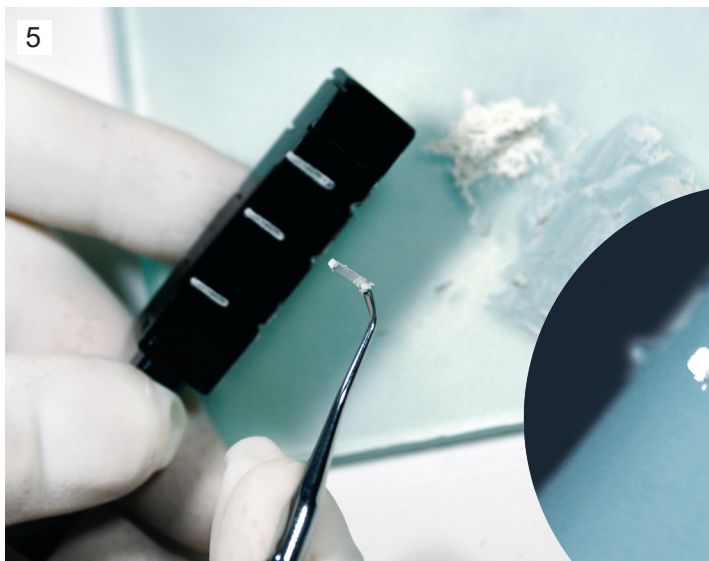

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Не залишайте матеріал в матриці, слід використовувати приготовлений матеріал протягом 10 хвилин.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Дотримуйтесь вимог, що наведені в керівництві з використання препарату МТА+.

У разі серйозного випадку, пов'язаного з пристроєм, про це слід повідомити виробника та компетентний орган держави, у якій проживає користувач або пацієнт.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в недоступному для дітей місці.

ПОВОДЖЕННЯ З ПРОДУКТОМ:

Перед використанням: протріть ізопропиловим або етиловим спиртом.

Після використання: видалити залишки матеріалу МТА+ з допомогою щітки і води з миючим засобом. Протерти MATRIX ізопропиловим або етиловим спиртом.

Стерилізація виробу при 121°C у паровому циклі, не впливає на зміну його фізичних характеристик (форма, розмір).

Уповноважений представник в Україні та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55, e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua



PPH CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковського 1
тел/факс 0048 15 842-35-85