

PL

TCAdent

Preparat do miejscowej kauteryzacji błony śluzowej
PRZED UŻYCIMI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKcją
 WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD: kwas trójchlorooctowy 35%, woda o czystości farmakopealnej, aromat.

PRZENACZENIE

Preparat TCAdent przeznaczony jest do miejscowej kauteryzacji (przyęgania) patologicznych zmian i drobnych krewień w jamie ustnej. Działanie preparatu polega na chemicznej koagulacji chorobowo zmienionej tkanki. Preparat wspomaga proces gojenia się zmian ziarninujących.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Dokładnie osuszyć chorobowo zmienione miejsce i odizolować (np. wazelina).
 2. Końcówkę dołączonego aplikatora nasączyć preparatem, nadmiar preparatu odcisnąć. Pocierać zmienioną tkankę, aż do momentu jej zabielenia.

3. Przeplukać czystą wodą.

UWAGA! Niedokładne wypłukanie preparatu może powodować zaburzenie wiązania mas wyciskowych.

Jeśli zmiany nie ustąpią po pierwszym zastosowaniu preparatu czynność powtarzać kilkakrotnie, co 2-4 tygodnie, aż do zaniku zmian.

Wyrób przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednorazowego. Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u osób z nadwrażliwością na składniki preparatu.
 Nie stosować u dzieci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować tylko na chorobowo zmienioną tkankę.
 Działa drażniąco na skórę i oczy. W razie kontaktu natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
 W razie spożycia nie zmuszać do wymiotów, wypić dużą ilość wody.
 Skontaktować się z lekarzem.

Podczas pracy z wyrobem należy stosować rękawiczki, okulary ochronne i odzież ochronną.

PRZECHOWYWARIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
 Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
 Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie, pod warunkiem szczelnego zamknięcia po każdorazowym użyciu.

DISPOSAL OF PACKAGING

Used containers should be disposed of or returned to the manufacturer.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYRÓBIE

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić je do wytwórcy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Buteleczka z zakraplaczem zawierająca 10 ml preparatu, aplikatory jednorazowe.

Data ostatniej aktualizacji: 24.06.2016/2

PL	Preparat do miejscowej kauteryzacji błony śluzowej
EN	Preparation for local cauterisation of mucous membranes
ES	Producto para la cauterización local de la mucosa
FR	Préparation pour la cauterisation locale de la muqueuse
DE	Präparat zu örtlicher Kauterisation der Schleimhaut

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Poland
 ul. Kwiatkowskiego 1
 Tel./fax: + 48 15 842 35 85
www.cerkamed.com



CE

Data ostatniej aktualizacji: 24.06.2016/2

EN

TCAdent

Preparation for local cauterisation of mucous membranes
PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS BEFORE USE
 FOR DENTAL USE ONLY

INGREDIENTS: Trichloroacetic acid 35%, Ph Eur purified water, aroma.

INDICATIONS FOR USE

TCAdent is used to cauterise local pathological changes and minor bleeding in the oral cavity.
 The healing effect of this preparation is achieved by chemical coagulation of pathologically altered tissue. The product promotes healing of granulating lesions.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Thoroughly dry the affected area and isolate it (with e.g. vaseline).
2. Soak the tip of the attached applicator in the preparation, get rid of any excess. Rub the altered tissue until it becomes white.
3. Rinse with clean water.

CAUTION! **Nieodpowiednie wypłukanie preparatu może powodować zaburzenie wiązania mas wyciskowych.**

If the lesions do not disappear after first use, repeat the procedure several times every 2-4 weeks until their complete disappearance.
 This product is reusable, but the applicator is intended for single use only. Repeated use of the applicator can pose a risk of secondary infections.

CONTRAINdications

Do not use in patients who are hypersensitive to any of the ingredients. Do not use this product in children.

PRECAUTIONS

Apply only on the affected area.
 This product can cause eye irritation. In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.
 If swallowed, do not induce vomiting and drink plenty of water. Contact your doctor immediately.
 Use gloves, safety goggles and protective clothing when working with the product.

STORAGE

Store in tightly closed original container below 25°C.
 Keep out of the reach of children.
 The expiry date is on the immediate packaging.
 After opening of the packaging, the expiry date does not change, providing it is tightly sealed after each use.

DISPOSAL OF PACKAGING

Used containers should be disposed of or returned to the manufacturer.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYRÓBIE

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić je do wytwórcy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Buteleczka z zakraplaczem zawierająca 10 ml preparatu, aplikatory jednorazowe.

Data ostatniej aktualizacji: 24.06.2016/2

ES

TCAdent

Producto para la cauterización local de la mucosa
ANTES DE USAR LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
 PRODUCTO A USAR SOLO POR EL DENTISTA

COMPOSICIÓN: ácido tricloroacético 35%, agua de calidad de la farmacopea, aroma.

USO CONFORME

El producto TCAdent está destinado a la cauterización local de alteraciones patológicas y pequeñas hemorragias en la cavidad bucal.
 La acción del producto consiste en la coagulación química del tejido afectado. El producto ayuda en el proceso de cicatrización de la granulación.

MODO DE USO

1. Secar bien la zona afectada e aislarla (p.ej. con vaselina).
2. Humectar con el producto la punta del aplicador adjunto, escurrir el exceso. Aplicar en el tejido afectado hasta que se vuelva blanco.
3. Enjuagar con agua limpia.

ATENCIÓN! **El enjuagado incorrecto del producto podrá afectar la unión del material de impresión.**

Si las alteraciones no se producen después de la primera aplicación del producto, repetir la operación varias veces, cada 2 a 4 semanas, hasta que desaparezcan.
 Producto de uso múltiple. Aplicador de uso único. El uso múltiple del aplicador puede causar el riesgo de contagio secundario.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en personas hipersensibles a los componentes del producto.
 No aplicar en niños.

PRECAUCIONES

Aplicar solo en el tejido afectado.
 Irritante para los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con agua abundante y consultar al médico.
 En caso de ingestión no provocar vomitos, beber mucha agua. Consultar al médico.
 Durante el trabajo con el producto usar guantes, gafas y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO

Conservar en envase original bien cerrado, a temperaturas inferiores a 25°C.
 Conservar fuera del alcance de los niños.
 La fecha de caducidad está impresa en el envase.
 Una vez abierto el envase, la fecha de caducidad no cambia siempre que el envase se cierre bien después de cada uso.

ELIMINACIÓN DE ENVASES DEL PRODUCTO

Los envases usados deben entregarse a su eliminación o devolverse al fabricante.

PRESENTACIÓN

Frasco con cuentagotas con 10 ml del producto, aplicadores desechables.



FR

TCAdent

Préparation pour la cauterisation locale de la muqueuse
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT UTILISATION
 PRODUIT DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT PAR LES DENTISTES

COMPOSITION: acide trichloroacétique 35%, eau purifiée pharmacopée, arôme.

DESTINATION

Le produit TCAdent est destiné à la cauterisation locale des altérations pathologiques et des saignements mineurs dans la bouche.
 L'action de cette préparation consiste en une coagulation chimique d'un tissu atteint. La préparation contribue à la cicatrisation des plaies granuleuses.

MODE D'EMPLOI

1. Sécher parfaitement une zone affectée et l'isoler (par ex. par la vaseline).
2. Imprégnérer l'embout de l'applicateur de la préparation, supprimer le surplus de la préparation. Frotter le tissu atteint jusqu'à ce qu'il devienne blanc.
3. Rincer à l'eau pure.

ATTENTION ! Un rinçage inadéquat des restes du produit peut avoir pour effet la perturbation du liage des matériaux d'impression.
 Si les altérations ne disparaissent pas après la première application de la préparation, répéter cette opération plusieurs fois, toutes les 2-4 semaines, jusqu'à la disparition complète des lésions.

Le produit est destiné à être utilisé plusieurs fois, tandis que l'applicateur n'est destiné qu'à une seule utilisation. La réutilisation de l'applicateur entraîne un risque d'infections secondaires.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez des patients hypersensibles à l'un des composants de la préparation.
 Ne pas utiliser chez les enfants.

PRÉCAUTIONS

Aplicar solo en el tejido afectado.
 Irritante para los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con agua abundante y consultar al médico.
 En caso de ingestión no provocar vomitos, beber mucha agua. Consultar al médico.
 Durante el trabajo con el producto usar guantes, gafas y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO

Conservar en envase original bien cerrado, a temperaturas inferiores a 25°C.
 Conservar fuera del alcance de los niños.

La fecha de caducidad está impresa en el envase.
 Una vez abierto el envase, la fecha de caducidad no cambia siempre que el envase se cierre bien después de cada uso.

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à une température inférieure à 25°C.

Stocker hors de la portée des enfants.

La date de péremption figure sur l'emballage direct.

Après l'ouverture de l'emballage, la date de péremption ne change pas à condition de le fermer hermétiquement après chaque utilisation.

MANIPULATION DES EMBALLAGES DU PRODUIT

Les emballages usagés doivent être recyclés ou remis au fabricant.

DISPONIBLE EN

Flacon avec pipette contenant 10 ml de préparation, appicateurs jetables.



DE

TCAdent

Präparat zu örtlicher Kauterisation der Schleimhaut
VOR GEBRAUCH MACHEN SIE SICH MIT DIESER BEILAGE BEKANNNT
 PRODUKTANWENDUNG AUSSCHLIESSLICH VOM ZAHNARZT

ZUSAMMENSETZUNG: Trichloressigsäure 35%, Wasser von Pharmakopöereinheit, Aroma.

BESTIMMUNG

Das Präparat TCAdent dient zur örtlichen Kauterisation (Ätzung) pathologischer Änderungen und winzigen Blutungen im Mund.
 Die Wirkung des Präparats beruht auf chemischer Koagulation des infolge der Krankheit veränderten Gewebes. Das Präparat unterstützt den Heilungsprozess der granulierenden Änderungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die infolge der Krankheit veränderte Stelle genau trocknen und isolieren (z.B. mit Vaseline).
2. Das Präparat in den beigefügten Applikator einträufeln, den Präparatsüberschuss ausdrücken. Das veränderte Gewebe solange reiben, bis es weiß wird.
3. Mit frischem Wasser spülen.

ACHTUNG! Nicht gründliches Ausspülen des Präparats kann das Härteten der Auspressmasse stören.

Falls die Veränderungen nach der ersten Anwendung des Präparats nicht zurückgehen, soll der Prozess alle 2-4 Wochen wiederholt werden, bis die veränderten Stellen voll geheilt werden.

Das Produkt ist zum mehrfachen Gebrauch bestimmt, der Applikator dagegen darf nur einmal verwendet werden. Beim mehrfachen Gebrauch des Applikators kann das Risiko der sekundären Infektion entstehen.

NEBENWIRKUNGEN

Препарат для местного прижигания слизистой оболочки
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ НИЖЕПРИВЕДЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
 ПРОДУКТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ

СОСТАВ: 35%-ная трихлоруссная кислота, вода фармакопейной чистоты, ароматизатор.

НАЗНАЧЕНИЕ
 Препарат TCAdent предназначен для местной каутилизации (прижигания) патологических изменений и незначительных кровотечений в ротовой полости.
 Действие препарата заключается в химической коагулации патологически измененной ткани. Препарат поддерживает процесс захвивания грануляционных изменений.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 1. Тщательно осушить пораженное место и изолировать его (например, вазелином).
 2. Конец прилагаемого аппликатора замочить в препарате, избыток препарата отжать. Протирать измененную ткань, пока она не побелеет.
 3. Промыть чистой водой.

ВНИМАНИЕ! В случае, если препарат не будет тщательно выполоскан, то это может привести к нарушению связывания слюнных материалов.

Если изменения не пройдут после первого применения препарата, действие повторить несколько раз, каждые 2-4 недели, пока изменения не исчезнут.
 Препарат предназначен для многоразового использования, но аппликатор можно использовать только один раз. Повторное использование аппликатора может создать опасность вторичной инфекции.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Не следует применять препарат у больных с повышенной чувствительностью к ингредиентам.
 Не применять у детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 Наносить только на пораженные ткани.
 Вызывает раздражение глаз и кожи. В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
 При попадании внутрь не вызывать рвоту, выпить большое количество воды. Обратиться к врачу.
 При работе с препаратом следует использовать перчатки, защитные очки и защитную одежду.

ХРАНЕНИЕ
 Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C.
 Хранить в недоступном для детей месте.
 Срок годности находится на первичной упаковке.
 После открытия упаковки срок действия не изменяется, при условии плотного закрывания после каждого использования.

ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКАМИ ИЗ-ПОД ПРЕПАРАТА
 Использованные упаковки следует передать для утилизации или вернуть их производителю.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ
 Бутылка с пипеткой, содержащая 10 мл препарата, одноразовые аппликаторы.

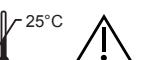

Preparato per la cauterizzazione locale della membrana mucosa
PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE
 IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: acido tricloroacetico 35%, acqua di purezza farmaceutica, aroma.

APPLICAZIONE

Il preparato TCAdent è dedicato alla cauterizzazione locale delle alterazioni patologiche e di piccoli sanguinamenti nella cavità orale. L'azione del preparato consiste nella coagulazione chimica del tessuto alterato patologicamente. Il preparato aiuta il processo di cicatrizzazione dei cambiamenti granulari.

MODALITÀ D'USO

1. Asciugare accuratamente il punto dell'alterazione patologica ed isolarlo (ad esempio con la vaselina).
 2. Bagnare il terminale dell'applicatore con il preparato, eliminare l'eccesso di preparato. Strofinare il tessuto alterato fino al momento del suo imballo.
 3. Sciaccuare con acqua pulita.

ATTENZIONE! Il risciacquo inaccurato può provocare l'alterazione del legame della pasta da impronta.

Se le alterazioni non spariscono dopo la prima applicazione di preparato, ripetere l'operazione più volte, ogni 2-4 settimane, fino alla sparizione delle alterazioni.

Il prodotto può essere usato più volte, invece l'applicatore è monouso. L'uso multiplo dell'applicatore può comportare il rischio di infezione retrograda.

CONTRINDICAZIONI

Non usare nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato.
 Non usare nei bambini.

PRECAUZIONI

Applicare solo sul tessuto alterato patologicamente.
 Il preparato ha un'azione irritante per gli occhi. In caso di contatto, sciaccuare immediatamente con molta acqua e contattare un medico.

In caso di ingerimento, non provocare forzatamente vomito, bere molta acqua.
 Contattare un medico.

Atunci când se lucrează cu produsul trebuie să utilizați mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione ben chiusa ed originale ad una temperatura non superiore a 25°C.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.
 La data di scadenza si trova sulla confezione diretta.

Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE

Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o restituite al produttore.

CONFEZIONI DISPONIBILI

Bottiglietta con contagocce contenente 10 ml di preparato, applicatori monouso.



Preparat pentru cauterizare locală la nivelul mucoasei

ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE
 PRODUS PENTRU UTILIZARE NUMAI DE CÂTRE UN MEDIC STOMATOLOG

COMPOZIȚIE: acid tricloroacetic 35%, apă de puritate farmaceutică, aromă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Preparatul TCAdent este destinat cauterizării (arderii) modificărilor patologice locale și sângerărilor minore în cavitatea bucală. Acțiunea preparatului constă în coagularea chimică a țesutului modificat patologic. Preparatul susține procesul de vindecare a schimbărilor inflamatorii. Il preparato aiuta il processo di cicatrizzazione dei cambiamenti granulari.

MOD DE UTILIZARE

1. Uscăti complet locul afectat și izolați-l (de ex. cu vaselină).
 2. Capătu aplicatorului inclus în set trebuie înmisiat în preparat, surplusul de preparat trebuie îndepărtat. Frecăți țesutul afectat până în momentul înălțirii acestuia.
 3. Clătiți cu apă curată.

ATENȚIE! Spălarea insuficientă a preparatului poate duce la o legare inadecvată a materialelor de impresione.

Dacă schimbările locului afectat nu se ameliorează după prima utilizare a preparatului, acțiunea trebuie repetată de către ori, la fiecare 2-4 săptămâni, până la dispariția schimbărilor țesutului modificat.

Produsul este conceput pentru utilizare multiplă, însă aplicatorul este de unică folosință. Utilizarea repetată a aplicatorului poate prezenta risc de infecție secundară.

CONTRAINDICATII

Nu se utilizează la pacienții cu hipersensibilitate la ingrediente.
 Nu se utilizează la copii.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Aplicați numai pe țesutul afectat.
 Îrită pielea și ochii. În caz de contact, clătiți imediat cu apă din abundență și contactați un medic.

În caz de ingerare, nu provocați forțat vomă, beți multă apă. Contactați un medic.

Atunci când se lucrează cu produsul trebuie să utilizați mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.

DEPOZITAREA

A se păstra în recipiente originale, închise hermetice, la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la indemâna copiilor.
 Perioada de valabilitate este indicată pe ambalajul primar.


După deschidere perioada de valabilitate nu se modifică, cu condiția înciderii hermetică după fiecare utilizare.

MODUL DE ELIMINARE A AMBALAJELOR PRODUSULUI

Ambalajele trebuie eliminate sau restituite producătorului.

AMBALAJE DISPONIBILE

Flacon cu picurător conținând 10 ml de preparat, aplicatoare de unică folosință.

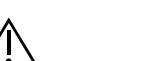

Készítmény a nyálkahártya helyi kauterizálására

HASZNÁLAT ELŐTT TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI UTASÍTÁST
 A TERMÉK KIZÁRÓLAG FOGORVOS HASZNÁLATRA KÉSZÜLT

ÖSSZETÉTEL: Trikloroacétáttal 35%, gyógyszerkönyvi tisztaságú viz, aroma.

RENDELTELTELÉS

A TCAdent termék rendeltetése a szájüregben található patológiai elváltozások és apró vérzések helyi kauterizációja (termokauterizáció). A készítmény működése azon alapul, hogy vegyileg koagulálja a kórosan elváltozott szövetet. A készítmény elősegíti a másodlagos hatásra gyógyuló elváltozások gyógyítását.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

1. Gondosan száritsák meg a kórosan elváltozott helyet, és izolálja azt (pl. vazelinával).
 2. Capătu aplicatorului inclus în set trebuie înmisiat în preparat, surplusul de preparat trebuie îndepărtat. Frecăți țesutul afectat până în momentul înălțirii acestuia.

3. Clătiți cu apă curată.

FIGYELEM! A termék nem megfelelő kiöblítése a lenyomatanyagok kötésénél rendellenességet okozhatják.

Ha az elváltozások nem szűnnek meg az első kezelés után, akkor ismételje meg többször, 2-4 hetenként, amíg az elváltozások el nem tűnnek.

A termék többszörösen használata készül, az aplicátor viszont csak egyszer használható. Az aplicátor többszörösen használata másodlagos fertőzés kockázatát rejtíti.

ELLENJAVALLATOK

Ne alkalmazza a termékkel azoknak a betegnek, akik túlzottan érzékenyek a készítmény összetevőire.
 Ne alkalmazza a termékkel gyermekeknek.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

A termékkel csak a kórosan elváltozott szövetre hordja fel.
 Bőr- és szemizsgató hatását. Ha szembre jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

Lényelés esetén tilos hánynatni, sok vizet kell inni, és orvoshoz kell fordulni.
 A termék alkalmazása során használjon védőszemüveget

és védőruhát.

TÁROLÁS

Tömörén lezárt eredeti csomagolásban tárolja 25°C alatti hőmérsékleten.

Felhasználhatóság dátuma: lásd a közvetlen csomagoláson.

A csomagolás felülről után a felhasználhatóság dátuma nem változik meg, amennyiben minden használattal tönkreményezzük.

Pri parada cu produsul să se deschidă perioada de valabilitate.

Prin urmare, nu se recomandă să se deschidă perioada de valabilitate.

KISZERELÉS

10 ml készítményt tartalmaz üveg cseppektővel, egyszeri aplikátorok.



Препарат за местна каутилизация на лигавицата

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА
 ПРОДУКТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА УПОТРЕБА ОТ ЛЕКАР-СТОМАТОЛОГ

СЪСТАВ: трихлороцетна киселина 35%, вода с фармакопейна чистота, аромат.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Препаратът TCAdent е предизначен за третиране на патологични изменения и кръвне в устната кухина. Действието на препарата се изразява в химическа коагулация на патологично изменена тъкан. Препаратът подпомага заразяването на гранулиращи изменения.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Внимателно подсушете патологично изменени участъци и го изолрайте (напр. с вазелин).

2. Използвайте накрайника на приложението на аппарат с препарата, отстранете излишното количество препарат. Втройте върху изменена тъкан, докато тя побелее.

3. Изплакнете с чиста вода.

ВНИМАНИЕ! Необстоито изплакване на препарата може да доведе до увреждането на отпечатъчната материя.

Ако измененията не изчезнат след първо третиране с препарата, повторете действията неколкократно, на всеки 2-4 седмици, докато настъпи промяна.

Продуктът е предназначен за многократна употреба, но аппаратът служи за еднократна употреба. Многократната употреба на аппаратора поражда риск от повторно заразяване.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ</h